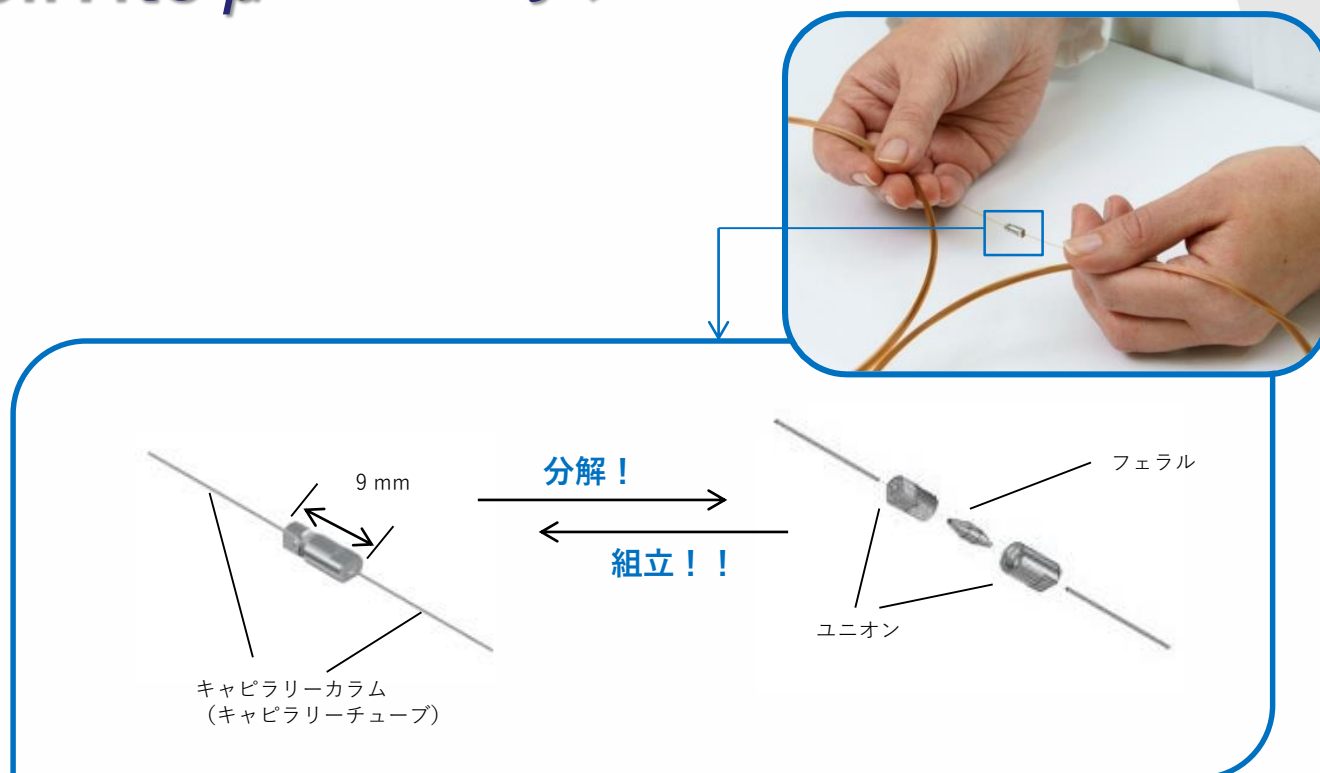


GC,GC/MSアクセサリ－

次世代型キャピラリーカラムコネクター

**SilTite  $\mu$ －ユニオン**


- 表面不活性処理済み金属フェラル(SilTite)の使用により、**不活性な流路を得る**ことができます。
- 金属フェラルのため、**オープン温度昇降後の増し締めが不要**です。
- 高温・高圧でも**高いシール性**を持つため、オープン温度の昇降を繰り返しても問題がありません。
- フェラル内の空間が小さいため、**低デッドボリューム**です。
- 専用治具により、**手締めで簡単に接続**できます。
- 全長9 mm、重量0.5 gと**小さくて軽く**、GCのオープン温度の昇降における**熱追従性**もあります。

**[ 各接続部品の比較 ]**

	SilTite $\mu$ －ユニオン	ガラスコネクター	ミニユニオン
大きさ	小さい	大きい	ふつう
デッドボリューム	小さい	小さい	ふつう
取付	手締めで簡単	熟練が必要	工具が必要
熱追従性	優れる	ふつう	ふつう
シール性	高い	GC動作中に接続が外れることがある	高い

## [ ユニオンキット ]

品名	交換用		適用カラム内径	入数	Cat.No.	価格
	ユニオン	フェラル				
SILTITE Micro Union 0.4 to 0.4	①	④	0.10 - 0.25 mm / 0.10 - 0.25 mm	ユニオン 2個 フェラル 5個	3001-26110	16,800
SILTITE Micro Union 0.4 to 0.5 <sup>*1</sup>	①	⑤	0.10 - 0.25 mm / 0.32 mm		3001-26111	16,800
SILTITE Micro Union 0.5 to 0.5	①	⑥	0.32 mm / 0.32 mm		3001-26112	16,800
SILTITE Micro Union 0.4 to 0.8 <sup>*1</sup>	②	⑦	0.10 - 0.25 mm / 0.53 mm		3001-26113	16,800
SILTITE Micro Union 0.5 to 0.8 <sup>*1</sup>	②	⑧	0.32 mm / 0.53 mm		3001-26114	16,800
SILTITE Micro Union 0.8 to 0.8	③	⑨	0.53 mm / 0.53 mm		3001-26115	16,800

\*1 レデュースユニオンです。



### [ キット内容 ]

ユニオン 2個

フェラル 5個

取付用治具

取扱説明書

キットの交換用部品は、下記表からお選び下さい。  
製品により、入数が異なりますのでご注意ください。

## [ 交換用ユニオン本体 ]

品名	適用カラム内径	入数	Cat.No.	価格
①SILTITE Micro Union Body 0.4 - 0.5 / 0.4 - 0.5	0.10 - 0.32 mm / 0.10 - 0.32 mm	5個	3001-26116	13,800
②SILTITE Micro Union Body 0.4 - 0.5 / 0.8 <sup>*1</sup>	0.10 - 0.32 mm / 0.53 mm		3001-26117	13,800
③SILTITE Micro Union Body 0.8 / 0.8	0.53 mm / 0.53 mm		3001-26118	13,800

\*1 レデュースユニオンです。

## [ 交換用フェラル ]

品名	適用カラム内径	入数	Cat.No.	価格
④SILTITE Micro Union Ferrule 0.4 - 0.4	0.10 - 0.25 mm / 0.10 - 0.25 mm	10個	3001-26119	9,000
⑤SILTITE Micro Union Ferrule 0.4 - 0.5	0.10 - 0.25 mm / 0.32 mm		3001-26120	9,000
⑥SILTITE Micro Union Ferrule 0.5 - 0.5	0.32 mm / 0.32 mm		3001-26121	9,000
⑦SILTITE Micro Union Ferrule 0.4 - 0.8	0.10 - 0.25 mm / 0.53 mm		3001-26122	9,000
⑧SILTITE Micro Union Ferrule 0.5 - 0.8	0.32 mm / 0.53 mm		3001-26123	9,000
⑨SILTITE Micro Union Ferrule 0.8 - 0.8	0.53 mm / 0.53 mm		3001-26124	9,000



東京営業部	TEL.03(5323)6611	FAX.03(5323)6622
大阪支店	TEL.06(6220)0500	FAX.06(6220)0601
横浜支店	TEL.045(985)7900	FAX.045(985)7901
東北営業所	TEL.024(534)2191	FAX.024(536)1518
筑波営業所	TEL.029(858)3700	FAX.029(858)3780
北関東営業所	TEL.048(778)5001	FAX.048(778)5005
千葉営業所	TEL.043(248)2441	FAX.043(248)2485
名古屋営業所	TEL.052(931)1761	FAX.052(931)1814
広島営業所	TEL.082(233)1101	FAX.082(233)1110
九州営業所	TEL.092(738)6633	FAX.092(738)6636

総合技術センター	TEL.04(2934)2121	FAX.04(2934)2128
カスタマーサポートセンター	TEL.04(2934)1100	FAX.04(2934)3361
福島工場	TEL.024(533)2244	FAX.024(534)2139

- 掲載している価格には消費税が含まれていません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中には TM および ® マークは明記していません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー30F  
TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622  
https://www.gls.co.jp E-mail:info@glsc.co.jp



安全に関するご注意  
ご使用前には必ず「取扱説明書」を  
よくお読みのうえ、正しくお使いください。

本カタログの内容は、2020年12月時点のものです。

AA983-20201208PDF