

HPLC, LC/MS カラム

アカデミックキャンペーン

学生・教員・教育機関のお客様を対象に

HPLC, LC/MSカラムを

40%OFF でご提供いたします

<キャンペーン期間>

2017年10月16日(月)～2018年2月16日(金)

上記期間中のご注文分が対象です

対象製品

InertSustain® シリーズ

InertSustain C18	InertSustainSwift C8	InertSustain Phenylhexyl	InertSustain Amide
InertSustain AQ-C18	InertSustain C8	InertSustain Phenyl	InertSustain NH2
InertSustainSwift C18	InertSustainBio C18	InertSustain Cyano NEW!	

Inertsil® シリーズ

Inertsil ODS-HL	Inertsil ODS-EP	Inertsil HILIC	Inertsil CN-3
Inertsil ODS-4	Inertsil Ph-3	Inertsil Amide	Inertsil Sulfa C18
Inertsil ODS-3	Inertsil WP300 C18	Inertsil Diol	Inertsil AX
Inertsil ODS-SP	Inertsil WP300 C8	Inertsil NH2	Inertsil CX
Inertsil ODS-P	Inertsil WP300 C4	Inertsil WP300 Diol	Inertsil AS
Inertsil C8-4	Inertsil Peptides C18	Inertsil SIL-100A	
Inertsil C8-3	Inertsil Acrolein C18	Inertsil WP300 SIL	

その他のLCカラム

InertCore C18	MonoTower C18	MonoSelect C18 for HTS NEW!
---------------	---------------	------------------------------------

注1) 分取カラムやキャピラリーカラム、メタルフリーPEEKカラムも対象製品です。
注2) ガードカラム・カートリッジガードカラムは対象外です。

各製品の詳細については、お近くの営業所にお問合せいただくか、ジーエルサイエンスのwebサイトをご参照ください。


HPLC, LC/MS カラム アカデミックキャンペーン

豊富なラインアップから最適なカラムを選択できます


ジーエルサイエンスのLCカラムは、それぞれ特長を持った豊富な種類の充填剤を揃えており、お客様の分析目的に合わせて最適なカラムをご紹介しますことができます。

【分析例：イソフラボンの一斉分析】


InertSustain C18

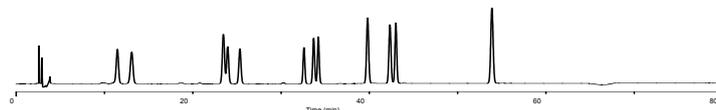

InertSustain AQ-C18

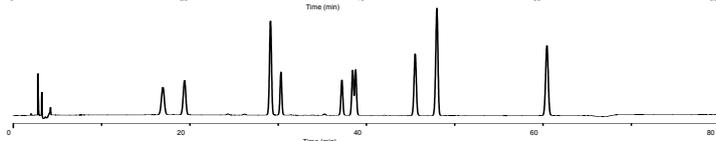


InertSustainSwift C18

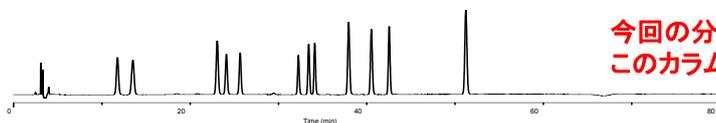


今回の分析では、
このカラムが最適と判断

Inertsil ODS-HL

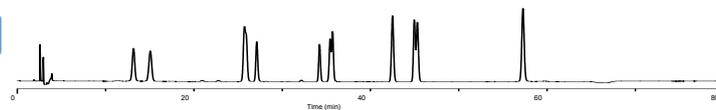

Inertsil ODS-SP

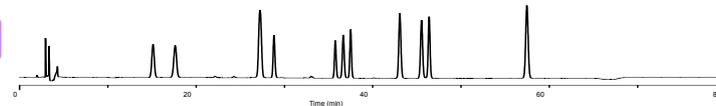

Column Size : 5 μm, 250 × 4.6 mm I.D.
 Eluent : A) CH₃CN/H₂O/CH₃COOH = 150/850/1, v/v/v
 B) CH₃CN/H₂O/CH₃COOH = 350/650/1, v/v/v
 Flow Rate : 1 mL/min
 Col. Temp. : 35 °C
 Detection : PDA 254 nm
 Injection Vol. : 10 μL

時間 (min)	溶離液A (%)	溶離液B (%)
0	100	0
10	100	0
60	0	100
61	100	0
80	100	0

▶ 弊社ホームページにLCアプリケーションを多数掲載しています。

〈イナートサーチ〉

https://www.gls.co.jp/technique/app/inert_search.html

〈テクニカルノート〉

https://www.gls.co.jp/technique/app/lc_technical_note.html

QRコード



東京営業部	TEL.03(5323)6611	FAX.03(5323)6622
大阪支店	TEL.06(6220)0500	FAX.06(6220)0601
(2017年8月移転)		
横浜支店	TEL.045(985)7900	FAX.045(985)7901
東北営業所	TEL.024(534)2191	FAX.024(536)1518
筑波営業所	TEL.029(858)3700	FAX.029(858)3780
北関東営業所	TEL.048(667)1611	FAX.048(667)1656
千葉営業所	TEL.043(248)2441	FAX.043(248)2485
名古屋営業所	TEL.052(931)1761	FAX.052(931)1814
広島営業所	TEL.082(233)1101	FAX.082(233)1110
九州営業所	TEL.092(738)6633	FAX.092(738)6636

総合技術センター	TEL.04(2934)2121	FAX.04(2934)2128
カスタマーサポートセンター	TEL.04(2934)1100	FAX.04(2934)3361
福島工場	TEL.024(533)2244	FAX.024(534)2139

- 掲載している価格には消費税が含まれていません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中には TM および ® マークは明記していません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本 社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー30F
 TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622
<https://www.gls.co.jp> E-mail:inf@glsc.co.jp

安全に関するご注意
 ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。